

OPTIME® R

Longueur aiguille Needle length mm	Longueur fil Thread length cm	Décimale / Metric	0,7	1	1,5	2	3	3,5	4
		USP	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1
		Couleur fil Thread color							

RONDE / TAPER 1/2 C

22	75	INCOLORE / UNDYED			12S15G	12S20G			
36	75							12S35D	

KL / TAPERCUTTING 3/8 C

14	75	INCOLORE / UNDYED		12S10C					
18	75				12S15C	12S20C			

KL / TAPERCUTTING 1/2 C

36	90	INCOLORE / UNDYED					12S30A	12S35A	
36	90							12S30AL	
40	90								12S40B
48	90								12S35E

TRIANGULAIRE / CUTTING 3/8 C

11	75	INCOLORE / UNDYED	12S07A						
13	75			12S10B	12S15D				
16	75			12S10D	12S15E	12S20E			
19	75				12S15F	12S20F	12S30E		
24	75				12S15B	12S20B	12S30C		
30	90					12S20D	12S30D	12S35C	

TRIANGULAIRE / CUTTING 1/2 C

26	75	INCOLORE / UNDYED					12S30G		
36	90							12S30F	12S35G
40	90								12S40A

TRIANGULAIRE DROITE / STRAIGHT CUTTING

50	75	INCOLORE / UNDYED			12S15A	12S20A	12S30B	12S35B	
----	----	-------------------	--	--	--------	--------	--------	--------	--

Boîte de 36 unités / Box of 36 units

Autres références : nous contacter / Other references: contact us



Z.I. LES VIGNES - 42, RUE BENOIT FRACHON - 93013 BOBIGNY CEDEX FRANCE - www.peters-surgical.com
Tél. : 33(0) 1 48 10 62 62 - Fax : 33(0) 1 48 91 22 99 - e-mail : commercial@peters-surgical.com & export@peters-surgical.com

Réf. : 98S122-2008 - Réalisation Mind Communication

SUTURES

SUTURES

Le confort au bout du fil
Be comfortable with your suture

OPTIME® R

OPTIME® R

Tresse résorbable rapide / Fast absorbable braid

**RAPIDE
FAST**






FIL / THREAD

Tresse résorbable d'acide polyglycolique (PGA) traitée pour une résorption rapide
 Absorbable polyglycolic acid braid (PGA) especially treated for a quick absorption

Sécurité / Security

- Très bonne tenue aux noeuds
- Temps de résistance : 10 -14 jours (Élimination spontanée de la suture ou à l'aide d'une compresse)
- Temps de résorption totale : 42 jours
- Biocompatibilité exemplaire
- Very good knot holding
- Strength retention time: 10 -14 days (Elimination of the suture spontaneously or just with a gauze)
- Total absorption time: 42 days
- Ideal biocompatibility

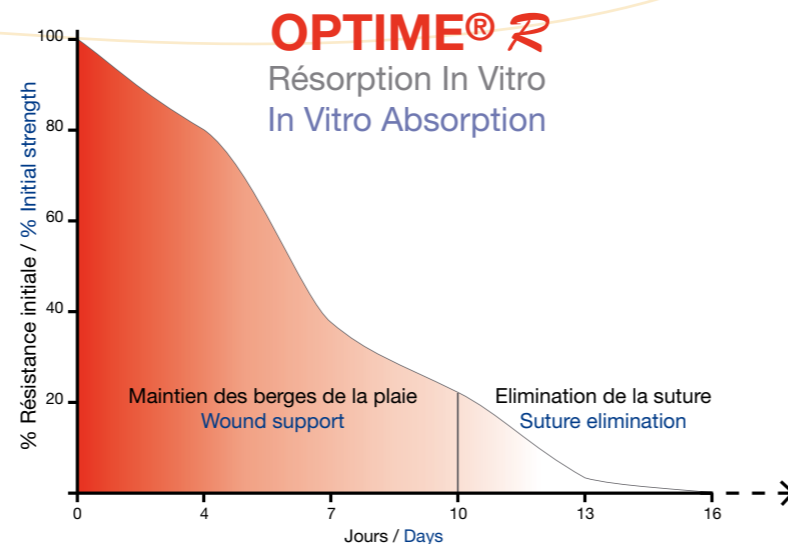

Confort / Comfort

- Pas d'ablation des fils : ni douleur, ni appréhension du patient
- Résultats cicatriciels excellents
- Souplesse et maniabilité du fil
- No removal of the sutures: no pain, no anxiety for the patient
- Excellent wound healing results
- Very soft thread and nice handling



AIGUILLE / NEEDLE

Pénétration tissulaire Tissue penetration

- Géométrie élaborée des pointes rondes, triangulaires ou KL (Tapercutting), adaptées à tout type de tissus
- Siliconage de haute qualité
- Enhanced design of sharp Taper point, Cutting point and Tapercutting point (KL), suitable for all types of tissue
- High quality silicone coating

Solidité / Resistance

- Excellente résistance à la flexion et bonne ductilité grâce à un acier inoxydable de haute performance (aiguilles issues de la chirurgie cardiovasculaire)
- High bending strength and ductility provided by high performance stainless steel (used in cardio vascular surgery)



PRESENTATION / PACKAGING

- Ouverture en 2 gestes :
 - Sachet aluminium déchirable
 - Accès direct à l'aiguille
- 2 step opening:
 - Aluminium tear pouch
 - Direct needle access



INDICATIONS / INDICATIONS

- Chirurgie obstétrique : réparation d'épisiotomie
- Chirurgie urologique : circoncision, phimosis
- Chirurgie pédiatrique
- Urgences : plaies cutanées, sutures sous plâtre
- Chirurgie dentaire et stomatologie : sutures des muqueuses
- Obstetrical surgery: episiotomy closure
- Urological surgery: circumcision, phimosis
- Paediatric surgery
- Emergency: cutaneous wound, sutures under plaster cast
- Dental surgery and stomatology: mucosae sutures